



PINCE ALIX

CET INSTRUMENT VOUS FACILITE UN GESTE CHIRURGICAL
PAS TOUJOURS SIMPLE POUR DES BROCHES DE Ø : 0,8 MM À 2 MM.

PINCE ALIX

RÉF.: 0227 02 00




- » Garantie : 5 ans,
- » 1 an pour les mors
- » Acier inoxydable
- » Modèle déposé ©

Coupe broche : 1,2 mm $\varnothing$ max

Longueur : 16,5 cm - Poids : 116 g

La coupe ALIX se fait par cisaillement (type coupe-cigare) et non par écrasement. De ce fait la qualité de la coupe en bout de broche est nette et sans bavure contrairement à une coupe standard.

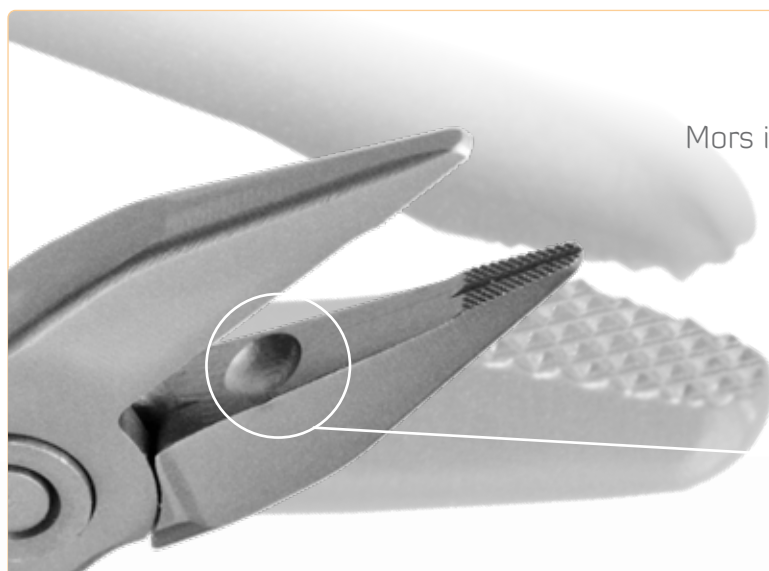

Mors inférieur rayuré avec une gorge en V.

Permet de sertir des embouts de protection de broche.

DISTRIBUÉ PAR

Aked

44 C, rue de Bray
F 35510 Cesson-Sévigné

Tél. : +33 (0)2 23 35 53 43

Fax : +33 (0)9 72 26 96 49

Mail : contact@aked.bzh

AKED.bzh