



Pour écrire/décrire le contenu de STERILIBOX



STERILIBOX LARGE

RANGEMENTS PETITS INSTRUMENTS

STERILIBOX LARGE

LA VERSATILITÉ DES PICOTS EN SILICONE


FOND DE LA STERILIBOX

Les rangées de picots sont juste en face des ouvertures latérales, ainsi les extrémités des instruments ne sortiront pas de la STERILIBOX.



COUVERCLE STERILIBOX

Les rangées des picots souples s'emboîtent avec ceux du fond de la boîte STERILIBOX, ainsi les instruments sont bien maintenus en place.

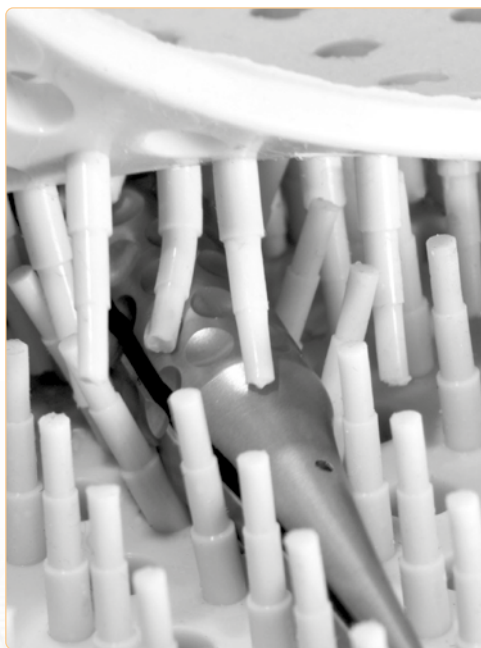

STERILIBOX LARGE

UNE BOÎTE EN SILICONE POUR PROTÉGER VOS INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

À partir d'un tapis en silicone pour stérilisation, ASKORN a conçu STERILIBOX, un conteneur destiné à transporter, protéger et garder stériles vos instruments chirurgicaux.



DONNÉES TECHNIQUES

Élastomère de silicone (catalyseur platine)

Dureté : 70 Shore A

Conforme USP VI & ISO 10993

Bases colorantes < 1% FDA

Dimensions utiles : 195 x 195 x 20 mm

Dimensions hors-tout : 205 x 205 x 28 mm



DISPONIBLE DANS LES 10 COULEURS CI-DESSOUS



réf.: BN JA OR RO RF GR VT VA NO BL

Réf. 0230 01 00



AKED.bzh

44 C, rue de Bray
F 35510 Cesson-Sévigné
Tél. : +33 (0)2 23 35 53 43
Fax : +33 (0)9 72 26 96 49
Mail : contact@aked.bzh

DISTRIBUÉ PAR